

AEROSEPT COMPACT 250

Sistem
de dezinfecție
pe cale aeriană



- Tratează de la 1 la 250m³
- Conform standard NFT 72-281 (versiune nouă)
- Proces complet automat cu ecran digital și programator de pornire
- Debit produs garantat de un sistem venturi original, asistat de o pompă peristaltică
- Trasabilitate electronică

INDICAȚII

Complet automat, portabil, atomizor independent
Pentru utilizare cu produsul dezinfectant ASEPTANIOS AD (activ 30 minute).
Pentru dezinfecția suprafețelor curate și a dispozitivelor medicale.

PROCES CU PERFORMANȚE ÎMBUNĂTĂȚITE

- Soluție încălzită la temperatura constantă de 55°C pe durata întregului proces de dezinfecție.

- Control secvențial automat al duzei ultrasonice => Previne consumul prea mic sau prea mare de produs.

- Concentrație perfect stabilizată la 7 ml/m³ realizată prin utilizarea sistemului original venturi asistat de o pompă peristaltică.


Ieșirea duzei nu este supusă posibilelor căderi de presiune ale aerului așa cum se întâmplă cu un sistem clasic venturi.

AEROSEPT COMPACT 250

Sistem de dezinfecție pe cale aeriană

PROCEDURĂ SIMPLĂ

- Proces complet automat (5 volume pre-definite și stare pentru 1 utilizator)
- 1 display, 1 tastatură: fiecare parametru are un simbol corespunzător pentru a simplifica pornirea și setarea echipamentului.
- Pornire întârziată presetată la 1 minut (reglabilă de la 1 minut la 9 ore)
- Înlocuire ușoară a lichidului fără riscul vărsării acestuia.

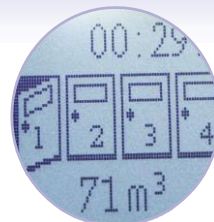

PROCES SIGUR

- Calcul automat al cantității de produs din container. Echipamentul va porni numai atunci când cantitatea de produs rămasă în container este suficientă pentru tratarea volumului camerei de dezinfectat.
- Oprire automată cu trasabilitate în caz de defecțiune
- Fără manevrarea produsului => container introdus într-un compartiment dedicat cu sistem de absorbție.



TRASABILITATE OPTIMĂ

Informații esențiale despre procesul de dezinfecție sunt înregistrate și preluate printr-o conexiune USB.

AEROSEPT COMPACT 250, când este conectat direct la un PC, permite preluarea informațiilor privind:

- Timpul de difuzie
- Timpul de contact
- Înlocuirea lichidului
- Problemele posibile întâlnite în timpul procesului de dezinfecție



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați echipamentul în the colțul camerei.
- Porniți selectând simbolul potrivit corespunzător volumului camerei.
- Timpul de difuzie se calculează automat.

- Funcția de pornire întârziată permite operatorului să părăsească în siguranță camera înainte de începerea ciclului.
- Oprire automată la finalul programului.
- Ventilați camera.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Capacitate: flacon de 2 litri
- Debit nominal: 1 litru/oră
- Greutate (fără lichid): 6 Kg
- Dimensiuni: H 310 mm x L 410 mm x l 280 mm
- Sursă de alimentare: 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

PRECAUȚII LA UTILIZARE

Înainte de fiecare utilizare citiți instrucțiunile fabricantului.

ASEPTANIOS AD: Periculos – respectați precauțiile la utilizare (stabilite conform Directivei 1999/45/EC și modificările ei). Înainte de fiecare utilizare citiți eticheta și informațiile privind produsul.

AEROSEPT COMPACT 250: Dispozitiv medical clasa I (Directiva 93/42/CEE și modificările ulterioare).



REFERINȚE

AEROSEPT COMPACT 250.....	417.600
COMPACT 250 SS CĂRUCIOR MOBIL.....	417.627
ASEPTANIOS AD.....	2122.724